



Notice d'utilisation

La plateforme Cureety donne accès au dispositif médical Cureety TechCare, un algorithme de classification paramétrable, qui permet de configurer des questionnaires de suivi propres au traitement et à la pathologie de chacun des patients suivis.

Cureety TechCare est un dispositif médical de classe I

Ce manuel d'utilisation est exclusivement destiné aux personnels de santé utilisant Cureety TechCare.

1

Informations générales



Informations de sécurité

Utilisation

Cureety TechCare est une application logicielle destinée à générer une classification de l'état clinique des patients atteints de maladies chroniques ou à risque d'hospitalisation, afin de faciliter la surveillance médicale à distance des signes cliniques et des éventuels événements indésirables, en complément des consultations physiques. Les patients peuvent lire des messages d'information relatifs à leur état clinique, afin de s'autosurveiller et d'améliorer leur qualité de vie.

Contre-indications

Le dispositif ne doit pas être utilisé par des patients de moins de 18 ans.

Précautions d'emploi

- Le dispositif ne doit être utilisé que par un patient disposant d'une autonomie suffisante pour utiliser les outils numériques.
- Pour le suivi des patients dont l'autonomie est insuffisante pour utiliser des outils numériques mais suffisante pour répondre aux questions par téléphone, le dispositif peut être utilisé à la place du patient par un professionnel de santé qui lui lit les questions par téléphone.
- Les professionnels de santé doivent être formés avant d'utiliser le dispositif.
- Afin de surveiller les signes cliniques et les éventuels effets indésirables, les professionnels doivent consulter à la fois les notifications et le tableau de bord.
- Le dispositif n'est pas destiné à être utilisé comme outil de diagnostic, ne peut remplacer les pratiques médicales en place et ne peut se substituer à des consultations régulières et à un système de prise en charge conventionnel des urgences médicales dans le cadre du traitement du patient.
- L'appareil doit être utilisé avec l'un des navigateurs suivants : Google Chrome, Firefox, Safari. Il ne doit pas être utilisé avec Internet explorer, ni avec tout autre navigateur, même si ce navigateur est installé par défaut sur votre smartphone, tablette ou ordinateur.
- L'application peut être temporairement indisponible pendant les activités de maintenance.
- Une connexion à Internet est nécessaire pour l'utilisation du dispositif.
- Les pistes d'amélioration et/ou incohérences constatées dans les questionnaires et/ou seuils de classification par les professionnels de santé doivent faire l'objet d'une communication à Cureety pour évaluation.
- Tout incident sérieux survenu en relation avec l'utilisation du dispositif Cureety Techcare doit être rapporté à Cureety ainsi qu'aux autorités compétentes de votre pays.

Informations générales

Utilisation

L'application Cureety et les fonctionnalités décrites dans ce manuel sont à destination des personnels soignants dans le domaine de l'oncologie qui ont une activité clinique dans un établissement de soins en France.

L'application Cureety a pour objectif de faciliter le suivi des effets secondaires rapportés par les patients atteints de cancer qui sont en cours de traitement dans l'établissement utilisateur.

L'application Cureety n'est pas un outil de diagnostic, ne peut remplacer les pratiques médicales en place et ne peut se substituer à des consultations régulières et à un système de prise en charge conventionnel des urgences médicales dans le cadre du traitement du patient.

Prérequis

L'accès à l'application Cureety requiert l'utilisation d'un ordinateur sous système Windows ou macOS, un navigateur internet (Google Chrome, Safari, Firefox) ainsi qu'un accès internet. Son utilisation ne requiert pas de procédure de maintenance particulière autre que la mise à jour normale du système d'opération et du navigateur internet.

2

Bénéfices



Les bénéfices de Cureety pour le patient

Sur l'application Cureety, le patient répond régulièrement à son questionnaire de santé personnalisé pour son traitement. En fin de questionnaire, il est invité à consulter ses messages thérapeutiques en cas de toxicités mineures ou à contacter son établissement de soins en cas de toxicités sévères.



**Messages thérapeutiques
pour chaque toxicité**



**Gain en autonomie dans le
parcours de soins**



**Lien renforcé avec le
personnel soignant**



**Partage de documents
médicaux**

Les bénéfices de Cureety pour le soignant

Le personnel soignant peut consulter l'ensemble de la patientèle classée par degré de gravité. Le soignant a accès à une fiche patient détaillée (historique des effets secondaires, informations médicales patient, prises en charge...)



Réduction du nombre d'appels téléphoniques



Gain de temps en consultation



Suivi précis des symptômes et prise en charge anticipée



Programmation de la venue en HDJ

3

Activation du compte



Email d'activation de compte



À la demande de l'administrateur de votre établissement de santé, un compte a été créé pour vous sur la plateforme de télésurveillance Cureety.

Activez votre compte en cliquant sur le bouton « J'active mon compte » ci-dessous pour accéder à l'application.

J'active mon compte

Cureety vous permet de renforcer le lien avec vos patients et d'être prévenu des effets secondaires liés à leur traitement entre chaque consultation.

Un manuel d'utilisation est disponible ci-dessous pour vous aider à prendre en main l'application.

↓ Je télécharge le manuel

Vous avez reçu cet email car vous avez été inscrit(e) sur Cureety. Si vous ne souhaitez plus recevoir d'emails de la part de Cureety, modifiez vos paramètres dans l'application dans la page [gestion des alertes](#).



Un administrateur Cureety ou de votre établissement de soin crée votre compte sur la plateforme. Vous recevez alors un email vous permettant d'activer votre compte.

Cliquez sur le bouton “J'active mon compte” pour accéder au parcours d'activation.

Parcours d'activation de compte



CUREETY

Bienvenue sur Cureety

Vérifiez et complétez vos informations pour activer votre compte.

Informations du compte Cureety

Nom(s) d'exercice : **Bontemps**
Prénom(s) d'exercice : **Orianne**
Email de connexion : **marion+orienne@cureety.com**
Profession : **Infirmier(e)**
Établissement : **Cureety**

Service *

Hépatologie

Numéro de téléphone

+33

En créant un compte sur Cureety, vous acceptez les [termes et conditions générales d'utilisation](#). Consultez notre [politique de confidentialité](#).

Continuer

Mentions légales


Espace de connexion sécurisé

Vérifiez que les informations renseignées sont exactes et corrigez ou complétez-les si nécessaire.

Consultez les conditions générales d'utilisation.

Cliquez sur le bouton “Continuer” pour passer à l'étape suivante.

Parcours d'activation de compte

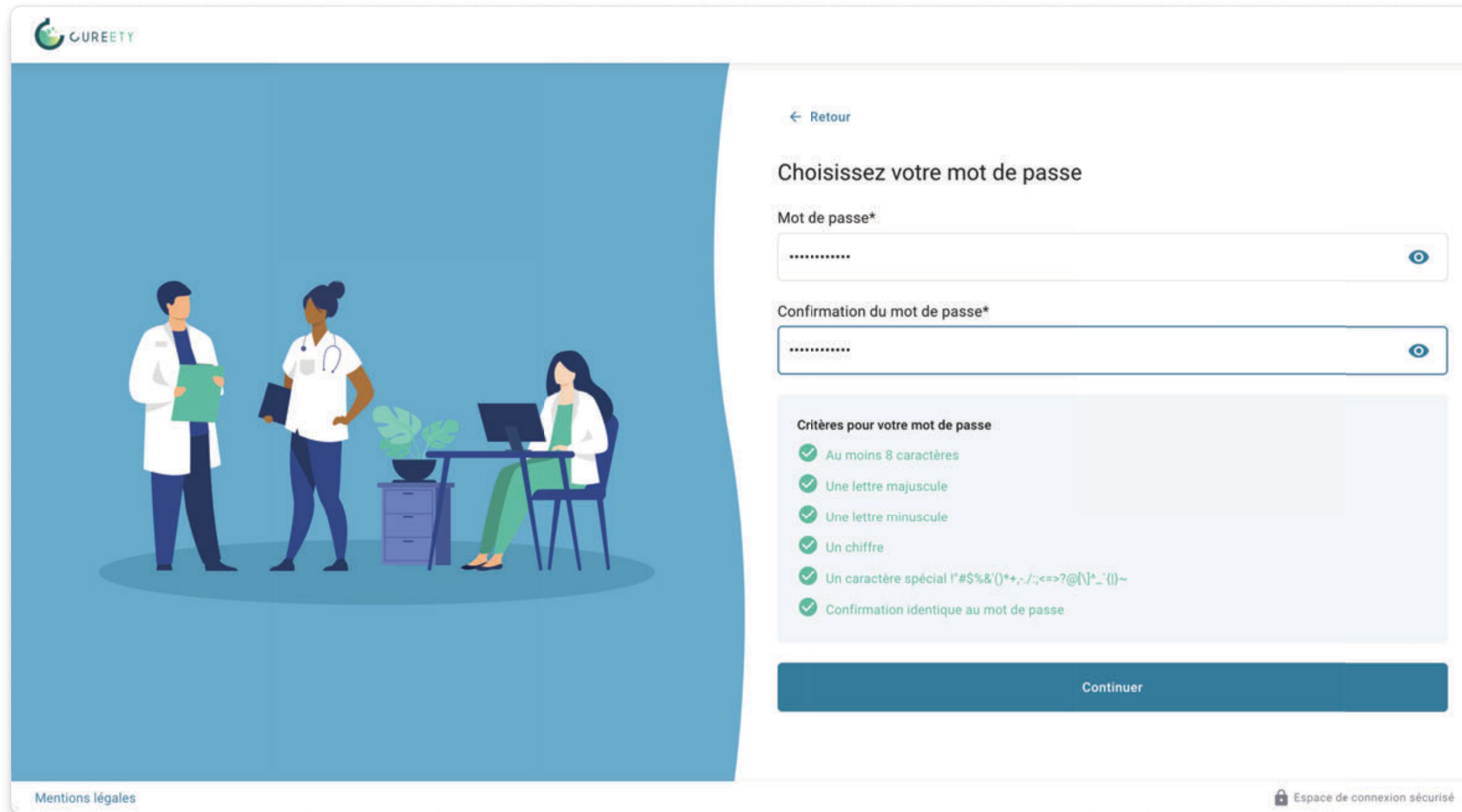

← Retour

Choisissez votre mot de passe

Mot de passe*

Confirmation du mot de passe*

Critères pour votre mot de passe

- ✓ Au moins 8 caractères
- ✓ Une lettre majuscule
- ✓ Une lettre minuscule
- ✓ Un chiffre
- ✓ Un caractère spécial !\"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[\\]^_`{|}~
- ✓ Confirmation identique au mot de passe

Continuer

Mentions légales

Espace de connexion sécurisé

Choisissez votre **mot de passe** en respectant les règles de sécurité indiquées.

Astuce : Vous pouvez cliquer sur l'oeil à droite dans le champ pour afficher les caractères que vous saisissez.

Cliquez sur le bouton “Continuer” pour confirmer votre compte et accéder à la plateforme soignant.

Parcours d'activation de compte

The screenshot displays the CUREETY web application interface. At the top, the header includes the CUREETY logo, the user's name 'Inf. Oriane Bontemps', and a navigation bar with a search icon, a bell icon, and a menu icon. A dropdown menu is open, showing options: 'Recherche avancée', 'Mon profil', 'Gestion des alertes', 'Liste des professionnels', 'À propos', and 'Se déconnecter'. Below the header, there are filters for 'Services' (Hépatologie) and 'Traitements en cours' (Tous les patients). The main content area features four tabs: 'Télésurveillance' (12 patient(s) à valider), 'Suivi téléphonique' (1 patient(s) à appeler), 'OK-Chimio' (À jour), and 'Suivi interrompu'. Below these tabs, there are filters for 'Suivi : En cours (24)' and 'Non démarré (53)'. A table lists patients with columns for 'Etat', 'Patient', 'Traitement(s) en cours', 'Consultation', and 'Questionnaire'. The table contains three rows of patient data. The first two rows show patients with a single treatment and consultation. The third row shows a patient with multiple treatments (5-Fluoro-Uracile and Carboplatine x Paclitaxel) and a consultation. Each row has a 'Valider' button in the 'Questionnaire' column.

Etat	Patient	Traitement(s) en cours	Consultation	Questionnaire
● 27 juil. 2023	Sylvie CLARISSE +33 1 77 11 14 68	⊕ Traitement	⊕ Consultation	Valider
● 24 juin 2022	Morgane CONSENT +33 9 45 35 87 38	⊕ Traitement	⊕ Consultation	Valider
● 16 août 2023	Marion DESVIL +33 6 00 00 00 19	⊕ 5-Fluoro-Uracile ⊕ Carboplatine x Paclitaxel (Taxol®) ... et 1 traitement(s) de plus	⊕ Consultation	Valider

Vous êtes alors directement connecté à la plateforme soignant.


Vous pouvez vous déconnecter en cliquant sur “Se déconnecter” dans le menu déroulant en haut à droite.

4

Inscription d'un patient



Ajout d'un nouveau patient

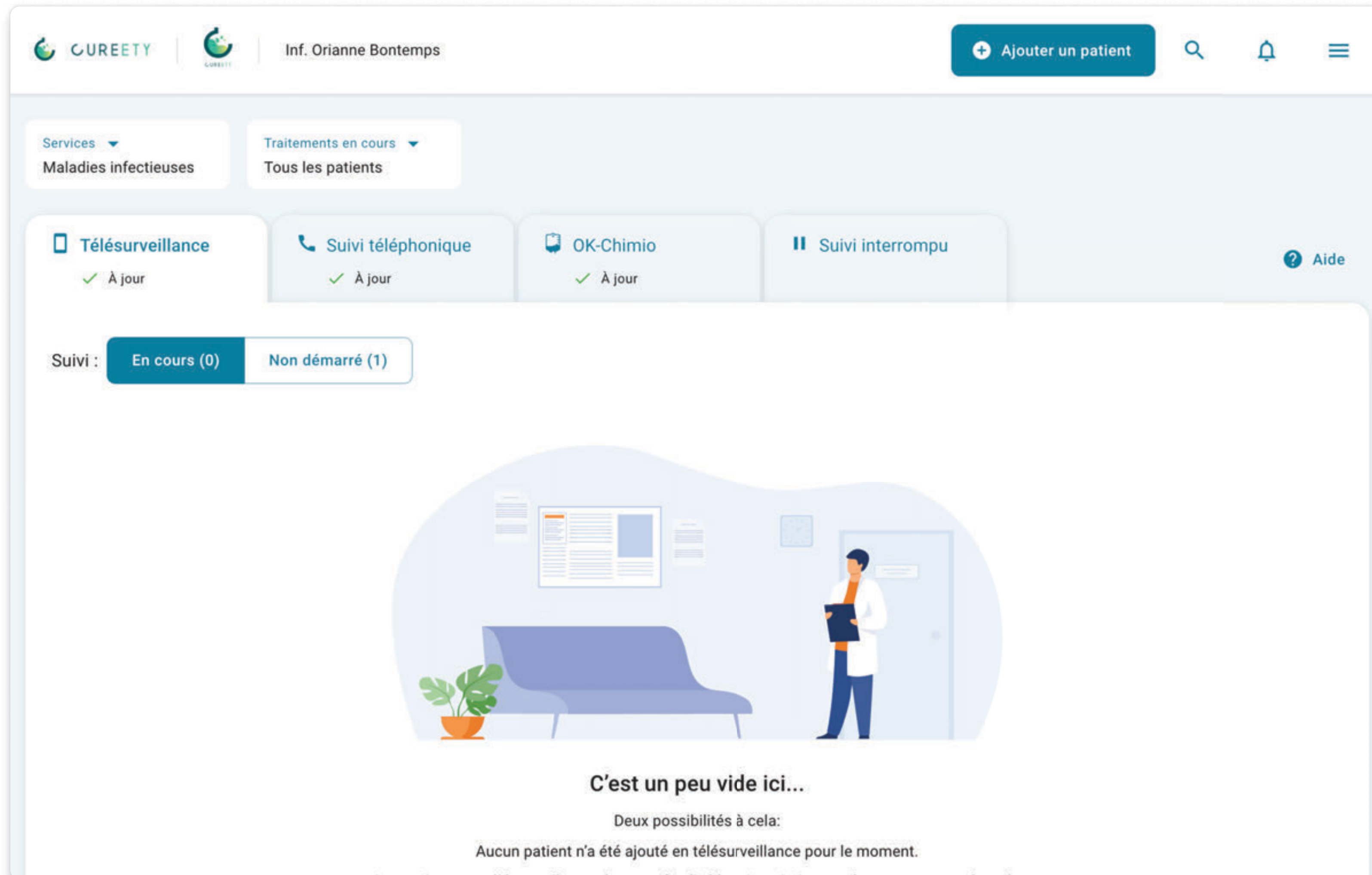

1

Depuis la page d'accueil, cliquez sur le bouton "Ajouter un patient" pour inclure un nouveau patient dans Cureety.

Choix du type de suivi

The screenshot shows a web form titled 'Ajouter un patient' with a progress bar at the top indicating six steps: 1. Pathologie et suivi, 2. Informations patient, 3. Traitement(s), 4. Questionnaire, 5. Suivi complémentaire, and 6. Confirmation. Step 1 is currently active. The form contains a dropdown menu for 'Pathologie *' with 'Cancer' selected. Below it, under 'Type de suivi *', there are two buttons: 'Télésurveillance' (highlighted in blue) and 'Suivi téléphonique'. At the bottom, there is a checkbox that is checked, with the text: 'Je confirme avoir informé le patient préalablement à son inclusion au sein de la Plateforme CUREETY, et avoir recueilli son consentement à cet effet ainsi qu'au partage de ses données de santé avec Cureety.' A blue button labeled 'Étape suivante →' is at the bottom right.

2

Sélectionnez la pathologie pour laquelle vous souhaitez suivre le patient.

3

Choisissez le type de suivi adapté au patient.

Le suivi téléphonique est uniquement recommandé pour les patients n'ayant aucun accès à un outil numérique, manquant d'autonomie et ne disposant pas d'aidant, ou ne souhaitant pas utiliser l'application.

4

Cochez la case pour confirmer que vous avez bien recueilli le consentement du patient concernant son inscription sur Cureety.

Saisie des informations personnelles et médicales

Pathologie et suivi Informations patient Traitement(s) Questionnaire Suivi complémentaire Confirmation

Informations patient

E-mail *

claralenoir@gmail.com

Numéro de téléphone *

+33 0678000076

Médecin référent à l'hôpital *

Dr. Boussebart

Numéro d'identitovigilance

Siège primitif du cancer :

Cancer du poumon

Stade du cancer *

Métastatique

☐ Le patient est intégré à un essai clinique.

☒ Je confirme avoir préalablement vérifié l'identité du patient à l'aide d'une pièce d'identité (carte d'identité nationale, passeport, titre de séjour).

5

Rentrez les informations de contact du patient.

Soyez vigilant en renseignant l'email du patient. Il lui permettra de s'identifier pour activer son compte et accéder à l'application. Si l'email est erroné, le patient ne sera pas en mesure d'activer son compte.

6

Sélectionnez le médecin référent et les détails de la pathologie du patient.

7

Facultatif : Précisez au besoin si le patient participe à un essai clinique.

8

Vérifiez bien l'identité du patient et cochez la case dédiée pour valider et passer à l'étape suivante.

Ajout du ou des traitements

The screenshot shows a web application interface for adding a patient. At the top, a progress bar indicates six steps: 1. Pathologie et suivi (checked), 2. Informations patient (checked), 3. Traitement(s) (active), 4. Questionnaire, 5. Suivi complémentaire, and 6. Confirmation. Below the progress bar, the 'Traitement(s)' section contains a search bar with the text 'gem'. A dropdown menu displays search results categorized by type: 'Injection' (Nab-paclitaxel (Abraxane®) x Gemcitabine (Gemzar®), Gemcitabine (Gemzar®) x Docetaxel (Taxotere®) x Trastuzumab (Herceptin®)), 'Protocole' (Gémox: Gemcitabine (Gemzar®) x Oxaliplatine (Eloxatine®)), and 'GEMCAP' (Capécitabine (Xeloda®), Gemcitabine (Gemzar®)).

9

Recherchez le traitement du patient en tapant au minimum les trois premières lettres de son nom générique ou de sa dénomination commerciale

Les traitements sont répertoriés en trois types : injection, per os, ou protocole. Vous pouvez faire la recherche par molécule, nom commercial ou encore intitulé de protocole.

Vous pouvez ajouter autant de traitements que souhaité.

Paramétrage du ou des traitements

✓

✓

3

4

5

6

Pathologie et suivi

Informations patient

Traitement(s)

Questionnaire

Suivi complémentaire

Confirmation

Traitement(s)

Injection

Gemcitabine (Gemzar®) x Docetaxel (Taxotere®) x Trastuzumab (Herceptin®)

Date de début04/09/2023Date de fin15/01/2024

+ Remplir le calendrier d'injections

Traitement

Tapez le nom du traitement recherché

Inclure le patient dans le module "OK-Chimio" pour valider ses injections

Le patient recevra des rappels SMS automatiques avant chaque injection

J-4 : rappel de faire l'analyse de biologie

J-1 : rappel d'ajouter les résultats de l'analyse dans le dossier clinique et de répondre au questionnaire de santé

- 10

Complétez les informations du ou des traitements.

Nous vous recommandons d'indiquer au moins la date de début des traitements.

Pour les injections vous pouvez, si vous le souhaitez, préciser les dates d'injections.

Pour les per os vous pouvez, si vous le souhaitez, indiquer la posologie.
- 11

Facultatif : Indiquez si vous souhaitez inclure le patient dans le module "OK-Chimio".

Ce module permet de valider la venue du patient en hôpital de jour pour recevoir son injection.

Le patient reçoit alors une invitation à remplir son questionnaire de toxicité et à déposer ses résultats d'analyse avant chaque cure.

Sélection du questionnaire de toxicité

←

Ajouter un patient

×

✓

✓

✓

4

5

6

Pathologie et suivi

Informations patient

Traitement(s)

Questionnaire

Suivi complémentaire

Confirmation

Questionnaire de toxicités

Cureety vous recommande le questionnaire suivant pour le ou les traitements renseignés.

☐ Gemcitabine (Gemzar®) x Docetaxel (Taxotere®) x Trastuzumab (Herceptin®)

☒ (français) Chimiothérapie x Anti-HER2 (Ac)

21 symptômes demandés

Syndrome main-pied

Eruption cutanée

Douleurs

Neuropathies

Prurit

Fièvre (avec risque de Neutropénie associée)

Palpitations

Appétit

Mucite / Irritation buccale

Toux

Eruption cutanée

Ictère

Douleurs articulaires/musculaires

Dyspnée

Asthénie

Oedème jambes

Vertiges

Maux de tête

Diarrhée

Nausées / Vomissements

Constipation

Fréquence de réponse attendue : tous les

7

 jours

i

🔍

 Rechercher d'autres questionnaires

←

 Étape précédente

Étape suivante →

12

Sélectionnez le questionnaire de toxicité que vous souhaitez attribuer au patient.

Cureety vous propose des questionnaires adaptés au(x) traitement(s) renseigné(s).

Par défaut, la fréquence de réponse attendue est paramétrée sur 7 jours. Vous pouvez modifier cette fréquence au besoin.

Notez que si le ou les questionnaires recommandés par Cureety ne vous conviennent pas, vous avez la possibilité de faire une recherche parmi les autres questionnaires en cliquant sur le bouton “Rechercher d’autres questionnaires”.

Sélection des questionnaires de suivi complémentaire

✓

✓

✓

✓

5

6

Pathologie et suivi

Informations patient

Traitement(s)

Questionnaire

Suivi complémentaire

Confirmation

Questionnaire de suivi complémentaire

Les questionnaires de suivi complémentaires vous permettent un suivi au plus près du patient.
2 questionnaires ont été assignés automatiquement à ce patient.

Nom du questionnaire	Type	Fréquence d'envoi	Répétition	Questions
☒ Questionnaire de satisfaction	Satisfaction	30 jours	Une seule fois	5
☒ Questionnaire de qualité de vie (EQ5D)	Qualité de vie	45 jours	Plusieurs fois	7
☐ Observance thérapeutique	Observance thérapeutique	14 jours	Plusieurs fois	6
☐ Questionnaire d'observance de MORISKY	Observance thérapeutique	7 jours	Plusieurs fois	4
☐ Questionnaire GIRERD	Observance thérapeutique	14 jours	Plusieurs fois	6

Besoin de suivre d'autres indicateurs ?

D'autres questionnaires (post-opératoire, nutrition, état psychologique...) peuvent être créés à la demande pour votre établissement.
N'hésitez pas à nous contacter à support@cureety.com pour nous faire part de vos besoins.

13

Cochez les questionnaires de suivi complémentaires que vous souhaitez attribuer au patient.

Ils vous permettent de suivre d'autres indicateurs tels que la satisfaction, la qualité de vie ou encore l'observance thérapeutique.

Notez que des questionnaires peuvent être créés à la demande pour votre établissement de santé.

Vérification et confirmation

Ajouter un patient

Pathologie et suivi Informations patient Traitement(s) Questionnaire Suivi complémentaire Confirmation

Confirmation des informations renseignées

Pathologie et suivi

Pathologie Cancer

Type de suivi Télésurveillance

Informations patient

Email claralenoir@gmail.com

Numéro de téléphone +33600897600

Médecin référent à l'hôpital Dr Boussemart

Siège primitif du cancer Cancer du poumon

Stade du cancer Métastatique

Traitement(s)

• Injection : Cisplatine x Etoposide - VP16

Questionnaire de toxicités

Questionnaire (français) Chimiothérapie

Fréquence d'envoi Tous les 7 jours

Questionnaire de suivi complémentaire

• Questionnaire de satisfaction

• Questionnaire de qualité de vie (EQ5D)

← Étape précédente Confirmer la création du patient ✓

14

Vérifiez que l'ensemble des informations saisies sont correctes et cliquez sur le bouton de confirmation pour valider l'inclusion du patient.

Cliquez sur les icones "crayon" pour revenir directement à une étape antérieure et faire des modifications.

Les patients inscrits en télésurveillance reçoivent alors un email et un SMS leur permettant d'activer leur compte et d'accéder à l'application.

5

Tableau de bord



Tableau de bord

Barre de navigation (ajout et recherche de patient, alertes, menu)

Filtres des patients par services et/ou traitements

Onglets permettant de naviguer entre les différentes listes patients

Contenu de l'onglet sélectionné (par défaut "Télésurveillance")

1

2

3

4

CUREETY

Dr. Marion

Ajouter un patient

Services

Mes patients uniquement

Traitements en cours

Tous les patients

Télésurveillance

4 patient(s) à valider

Suivi téléphonique

3 patient(s) à appeler

OK-Chimio

À jour

Suivi interrompu

Aide

Suivi :


En cours (10)

Non démarré (2)

Patients inscrits en télésurveillance : 12


Etat	Patient	Traitement(s) en cours	Consultation	Questionnaire
08 nov. 2023	Aurore BOREAL +33 6 00 00 98 76	Cisplatine jeu. 09 nov.	mer. 15 nov.	Valider
08 nov. 2023	Etienne ANDRIEUX +33 6 00 00 98 76	5-Fluoro-Uracile x Oxaliplatine (Eloxatine®) mer. 29 nov.	Consultation	Valider
08 nov. 2023	Jean-baptiste MOUNIER +33 6 00 00 98 76	Radiothérapie Pulmonaire	ven. 17 nov.	Valider
08 nov. 2023	Marcelle CHAPON +33 6 00 00 98 76	Cisplatine	Consultation	Valider

Tableau de bord

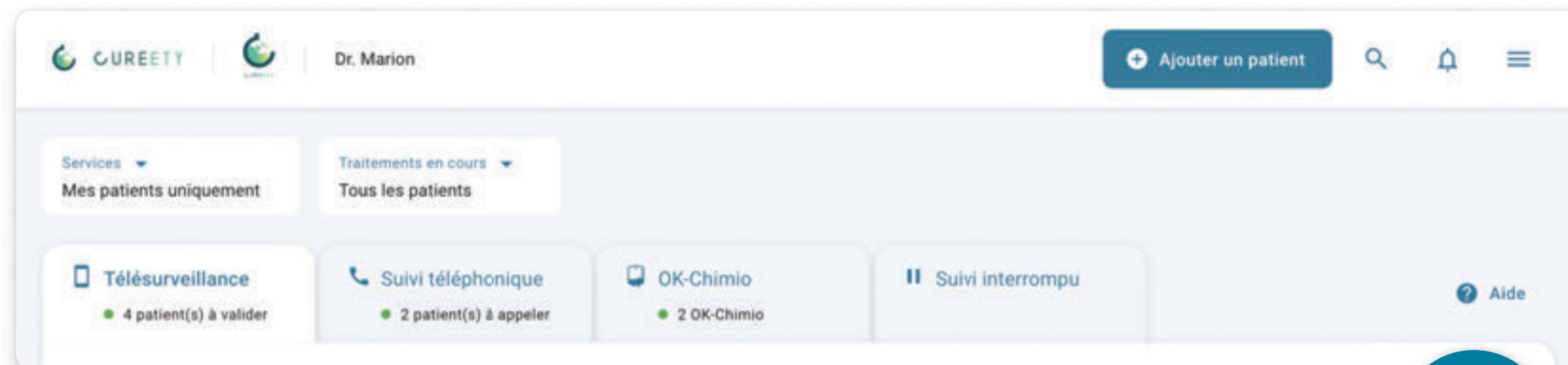

5

Le bouton “Aide”, à gauche des onglets, donne accès à une explication détaillée des différents statuts des patients suivis.

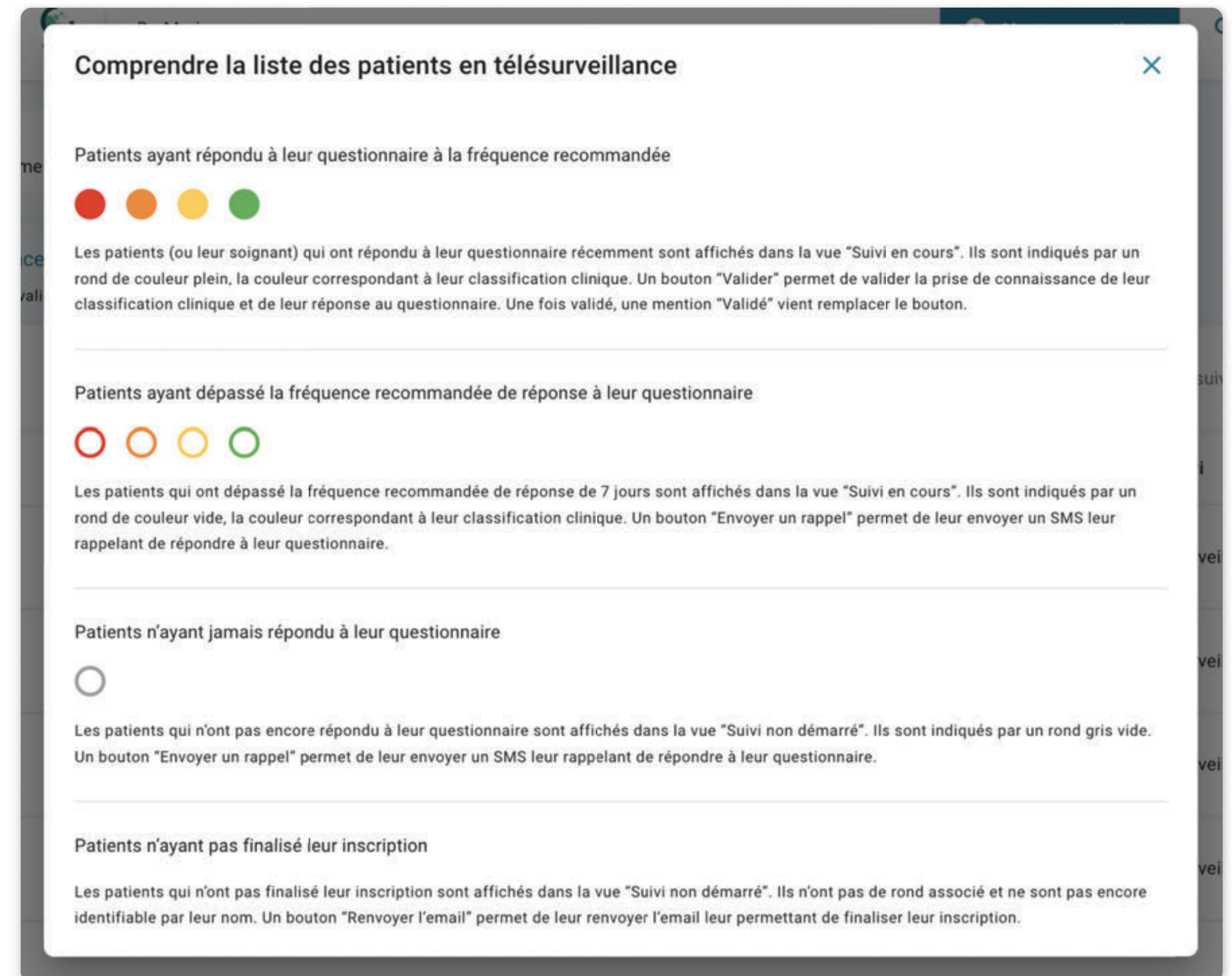

Onglet “Télésurveillance”

Navigation entre la liste des patients en cours de suivi et la liste de ceux n’ayant pas activé leur compte ou répondu à un premier questionnaire

Les patients ayant répondu récemment à leur questionnaire remontent en haut du tableau, avec un bouton “Valider”

Les patients à jour apparaissent en seconde position

Les patients n’ayant pas répondu depuis un moment sont en bas de liste et un bouton permet de leur envoyer un rappel

Télésurveillance
4 patient(s) à valider

Suivi téléphonique
3 patient(s) à appeler

OK-Chimio
À jour

Suivi interrompu

Aide

Suivi :
En cours (10)
Non démarré (2)

Patients inscrits en télésurveillance : 12

Etat	Patient	Traitement(s) en cours	Consultation	Questionnaire
 08 nov. 2023	Aurore BOREAL +33 6 00 00 98 76	 Cisplatine jeu. 09 nov.	mer. 15 nov.	Valider
 08 nov. 2023	Etienne ANDRIEUX +33 6 00 00 98 76	 5-Fluoro-Uracile x Oxaliplatine (Eloxatine®) mer. 29 nov.	 Consultation	Valider
 08 nov. 2023	Jean-baptiste MOUNIER +33 6 00 00 98 76	 Radiothérapie Pulmonaire	ven. 17 nov.	Valider
 08 nov. 2023	Marcelle CHAPON +33 6 00 00 98 76	 Cisplatine 	 Consultation	Valider
 08 nov. 2023	Cathy MINIE +33 6 00 00 98 76	 Prednisone (Cortancyl®)	lun. 20 nov.	✓ Validé le 08 nov. 2023
 08 nov. 2023	Elsa ROSE +33 6 00 00 98 76	 Traitement	mer. 29 nov.	✓ Validé le 08 nov. 2023
 08 nov. 2023	Thomas DELAHAYE +33 6 00 00 98 76	 Cisplatine jeu. 09 nov.	mer. 29 nov.	✓ Validé le 08 nov. 2023
 Sans réponse depuis le 26 sept. 2023	Aude JAVEL +33 6 00 00 98 76	 Cisplatine jeu. 09 nov.	jeu. 14 déc.	Envoyer un rappel Dernier le 08 nov. 2023

Onglet “Suivi téléphonique”

Les patients à appeler ce jour sont en haut du tableau, avec un bouton “Démarrer”

1

Les patients dont la date d’appel est dans le futur apparaissent en second, et la date peut être modifiée au besoin

2

Télésurveillance
4 patient(s) à valider

Suivi téléphonique
2 patient(s) à appeler

OK-Chimio
À jour

Suivi interrompu

Aide

Patients suivis par téléphone : 5

Etat	Patient	Docteur	Traitement(s) en cours	Consultation	Appel
Ajouté le 08 nov. 2023	Raphaël GARRIDO +33 6 00 56 00 87 57 ans	Dr. Marion	Pembrolizumab (Keytruda®)	Consultation	mer. 08 nov. Démarrer
08 nov. 2023	Jade ROUSSEaux +33 6 00 00 98 79 83 ans	Dr. Marion	Chloraminophène (Chlorambucil®) Rituximab (Mabthera®) jeu. 09 nov.	Consultation	jeu. 09 nov. Démarrer
08 nov. 2023	Mylène PRUNIER +33 7 00 00 43 98 70 ans	Dr. Marion	Traitement	mer. 22 nov.	mar. 14 nov. À jour
09 nov. 2023	Jean-philippe FOURNIER +33 6 00 89 00 00 76 ans	Dr. Marion	Acétate d'abiratéron(Zytiga®)	mer. 22 nov.	mar. 21 nov. À jour

Module de suivi téléphonique

Accès au questionnaire de toxicité du patient afin de répondre avec lui

1

Espace de prise de notes ou de compte-rendu de l'échange

2

Choix de la date du prochain appel

3

 Suivi téléphonique du patient

 Répondre au questionnaire avec le patient

Notes ou résumé de l'échange

Date du prochain appel *

25/10/2023

 Valider

Onglet “OK-Chimio”

Vue journalière et navigation jour par jour
Par défaut on affiche la liste des patients dont la cure est prévue le lendemain

Patients en attente de leur validation de cure avec un bouton “À valdier”

Patients traités, pour lesquels la cure a été validée, annulée ou reportée

Télésurveillance
4 patient(s) à valider

Suivi téléphonique
2 patient(s) à appeler

OK-Chimio
2 OK-Chimio

Suivi interrompu

Aide

mercredi 8 novembre
0/0

jeudi 9 novembre
0/1

**vendredi 10 novembre
2/4**

samedi 11 novembre
0/1

dimanche 12 novembre
0/0

Etat	Patient	Docteur	Type de suivi	Consultation	Ok-Chimio
08 nov. 2023	Aurore BOREAL	Dr. Marion	Télésurveillance	mer. 15 nov.	À valider
08 nov. 2023	Jade ROUSSEAUX	Dr. Marion	Suivi téléphonique	+ Consultation	À valider
Sans réponse depuis le 26 sept. 2023	Aude JAVEL	Dr. Marion	Télésurveillance	jeu. 14 déc.	✓ Validé
08 nov. 2023	Thomas DELAHAYE	Dr. Marion	Télésurveillance	mer. 29 nov.	✓ Validé

Module de validation de chimio

- 1 Fichier de résultats de biologie déposé dans le dossier clinique par le patient ou son soignant
- 2 Résultats du dernier questionnaire de toxicité répondu
- 3 Rapport synthétique des effets secondaires et événements médicaux du patient sur les 30 derniers jours
- 4 Boutons permettant de valider ou annuler/reprogrammer la chimio

←

Validation de l'injection du patient

Aurore BOREAL

Sexe

Age

Poids

Femme

78 ans

73 kg

IMC

25.26

Téléphone

+33 6 00 00 98 76

Médecin référent

Dr. Marion

Dernières analyses médicales

Resultats-biologie-081123.pdf

Résultat d'analyse médicale - ajoutée par médecin référent Marion le 09/11/2023

Dernier questionnaire de santé

État à surveiller

Mercredi 08 novembre à 11:16 - 6 effets secondaires

Message reçu par le patient

Voir

4 messages thérapeutiques envoyés

Voir

Effets secondaires reportés

Appétit (Grade 2)

Diarrhée (Grade 2)

Baisse de l'audition (Grade 1)

Dyspnée (Grade 1)

Rapport synthétique (30 derniers jours)

👁️

⬇️

Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8 ② Diarrh... ② Appétit ① Asthé... ① Naus... ① Dyspn... ① Bais...	9	10 Injection Cisplatine	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26

✕ Annuler ou reprogrammer

✓ Valider

29

Onglet “Suivi interrompu”

Liste des patients pour lesquels le suivi a été interrompu avec indication du motif (décès, rémission, changement d'établissement, etc.)

1

Télésurveillance
4 patient(s) à valider

Suivi téléphonique
2 patient(s) à appeler

OK-Chimio
2 OK-Chimio

Suivi interrompu

Aide

Patients dont le suivi est interrompu : 4

Statut	Interruption	Patient	Docteur	Type de suivi
Rémission	mer. 08 nov.	Aude JAVEL	Dr. Marion	Télésurveillance
Soins palliatifs	mer. 08 nov.	Artie SHOW	Dr. Marion	Télésurveillance
Décès	mer. 08 nov.	Christophe GIROD	Dr. Marion	Télésurveillance
Décès	lun. 09 oct.	Anna CONDA	Dr. Marion	Télésurveillance

6

Fiche patient



Fiche patient

Barre de navigation (notifications, messagerie, accès questionnaire, etc.)

Informations générales sur le patient (identité, contact, pathologie, etc.)

Validation des réponses au questionnaire de toxicité et historique des classifications cliniques

Rapport synthétique des effets secondaires et événements médicaux passés, sous forme calendrier

The screenshot displays the 'Fiche patient' interface for 'Aurore BOREAL'. It features a top navigation bar (1) with icons for notifications, messaging, and questionnaires. The main content area is divided into several sections: 'INFORMATIONS' (2) showing patient details like name, age, sex, weight, and pathology; 'AGENDA' (5) displaying a calendar of medical appointments; 'TRAITEMENTS' (6) showing ongoing, upcoming, and completed treatments; 'HISTORIQUE DES CLASSIFICATIONS CLINIQUES' (3) listing clinical classifications with validation buttons; 'QUESTIONNAIRES DE SUIVI' (7) showing follow-up questionnaires; 'RAPPORT SYNTHÉTIQUE' (4) displaying a calendar of secondary effects and medical events; 'PRISE EN CHARGE' (8) showing a history of care and consultations; and 'DOSSIER CLINIQUE' (9) displaying a list of clinical documents.

1 Barre de navigation (notifications, messagerie, accès questionnaire, etc.)

2 Informations générales sur le patient (identité, contact, pathologie, etc.)

3 Validation des réponses au questionnaire de toxicité et historique des classifications cliniques

4 Rapport synthétique des effets secondaires et événements médicaux passés, sous forme calendrier

5 Gestion des rendez-vous médicaux

6 Gestion du ou des traitements et des dates d'injection

7 Réponses aux questionnaires de suivi complémentaire (satisfaction, qualité de vie, observance thérapeutique, etc.)

8 Historique et ajout de prises en charge (échange avec le patient, compte-rendu de consultation, etc.)

9 Dossier de partage de documents avec le patient : envoi et réception de résultats d'analyses, ordonnances, etc.

Messagerie

Affichage des messages non lus en premier, suivis par l'historique des messages lus

Vous pouvez démarrer une nouvelle conversation avec le patient à tout moment

The screenshot shows a web interface titled "Messagerie avec le patient". On the left is a sidebar with a list of messages, categorized into "Non lus (0)" and "Lus (5)". The "Lus" section contains three items: a "Message direct" from "L'équipe soignante" dated "28 avril, 10:35", a "Questionnaire du 16/12/22" dated "18 janvier, 15:12", and another "Questionnaire du 04/01/23" dated "18 janvier, 15:12". At the bottom of the sidebar is a button "Créer une nouvelle conversation". The main area on the right shows the details of the selected "Questionnaire du 27/10/22". It includes a header with the date and patient name "Mme BOREAL", and a button "Clôre la conversation". The message content is "Crampes d'estomac occasionnelles". Below this is a response from "L'équipe soignante" dated "Lun 14 Novembre, 23:11", stating "Madame, Monsieur Nous avons pris connaissance de votre message. Vous serez recontacté par l'équipe soignante si nécessaire." with a green checkmark and "Vu par le patient le 08/11 à 11:14". At the bottom is a "Message" input field and an "Envoyer" button.

1

2

3

4

5

Vous pouvez clore une conversation si vous n'attendez plus de réponses : le patient ne pourra plus envoyer de messages dans cette discussion

Conversation ouverte avec l'historique des messages échangés et confirmation de la lecture par le patient

Notez que lorsque le patient précise d'autres effets indésirables à la question ouverte du questionnaire de toxicité, ceux-ci arrivent dans cet espace de messagerie et vous pouvez y répondre.

Espace de saisie de votre message

7

Comprendre l'algorithme



Comprendre l'algorithme de Cureety

À l'issue de son questionnaire, le patient est classé parmi 4 catégories de risque.

Chaque catégorie de risque correspond à un intervalle de points.

Chaque réponse à un grade de toxicité octroie des points.

La classification clinique correspond à la somme des points de chaque réponse.

Correct

Entre 0 et 2 points

Le patient reçoit un message encourageant et est invité à consulter ses messages thérapeutiques s'il a reporté des effets secondaires mineurs.

Fragilisé

Entre 2 et 8 points

Le patient reçoit un message rassurant et est invité à consulter ses messages thérapeutiques.

À surveiller

Entre 8 et 32 points

Le patient est invité à contacter son hôpital par téléphone pour une prise en charge non urgente.

Critique

Plus de 32 points

Le patient est invité à contacter son hôpital par téléphone pour une prise en charge urgente.

8

Oubli du mot de passe



Oubli du mot de passe

CUREETY Je suis un(e) patient(e) Créer un compte professionnel

Connectez-vous à votre compte professionnel

Adresse e-mail ou numéro RPPS/ADELI *

Mot de passe *

Se connecter

[Mot de passe oublié](#)

OU

s'identifier avec PRO SANTE CONNECT Un service du ministère chargé de la Santé

Mentions légales Espace de connexion sécurisé

Besoin d'aide ou d'informations ? Envoyez un mail à support@cureety.com

1

Cliquez sur “Mot de passe oublié” en bas de l’interface de connexion.

Oubli du mot de passe

 Je suis un(e) patient(e)



Besoin d'aide ou d'informations ?
Envoyez un mail à support@cureety.com

[← Retour](#)

Réinitialiser mon mot de passe

Pour réinitialiser votre mot de passe, vous aurez besoin d'accéder à l'adresse email associée à votre compte Cureety. Ces informations de vérification permettent de garantir que vous êtes la seule personne à avoir accès à votre compte.

Une fois l'email renseigné, vous recevrez un email avec un lien vous permettant de réinitialiser votre mot de passe.

E-mail *

Envoyer

[Mentions légales](#)

 Espace de connexion sécurisé

2

Renseignez votre adresse email de connexion pour recevoir un lien de réinitialisation de mot de passe.

Oubli du mot de passe

3

Dans l'email, cliquez sur le bouton "Définir un nouveau mot de passe".

Vous pouvez alors choisir votre nouveau mot de passe et accéder à votre espace soignant.



Vous avez demandé à réinitialiser votre mot de passe.

Cliquez sur le bouton suivant pour définir un nouveau mot de passe pour votre compte hcp@gmail.com

Définir un nouveau mot de passe

Si vous n'êtes pas à l'origine de cette demande de réinitialisation, veuillez contacter le support de Cureety à l'adresse suivante support@cureety.com

Vous avez reçu cet email car vous avez été inscrit(e) sur Cureety. Si vous ne souhaitez plus recevoir d'emails de la part de Cureety, modifiez vos paramètres dans l'application dans la page [gestion des alertes](#).



9

Contacts Cureety



Contacts Cureety

Nicolas BEGIN

06 79 73 32 34

nicolas@cureety.com

Pascal FLECK

06 43 48 53 86

pascal@cureety.com

Nicolas HARDY

06 82 69 02 69

nicolas.hardy@cureety.com

Élise LAUNAY

06 25 68 47 55

elise@cureety.com

Philippe LEMEURE

06 07 18 38 74

philippe@cureety.com

Morgane LONCKE

06 17 31 02 15

morgane@cureety.com

Support technique

Si vous rencontrez la moindre difficulté lors de votre utilisation de l'application, contactez notre support technique :

- par email à l'adresse support@cureety.com
- par téléphone au **07 66 72 30 47**



Cureety TechCare




Cureety TechCare est une application logicielle destinée à générer une classification de l'état clinique des patients atteints de maladies chroniques ou à risque d'hospitalisation, afin de faciliter la surveillance médicale à distance des signes cliniques et des éventuels événements indésirables, en complément des consultations physiques. Les patients peuvent lire des messages d'information relatifs à leur état clinique, afin de s'autosurveiller et d'améliorer leur qualité de vie.

Cureety TechCare est un dispositif médical selon la réglementation européenne. Il est utilisé via la plateforme Cureety.

Contact

Pour toute demande de support ou réclamation, veuillez contacter notre service support :

- Par téléphone : [07 66 72 30 47](tel:0766723047)
- Par email : support@cureety.com

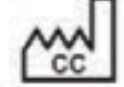	Marquage CE	
5.7.7 	Dispositif médical	
5.1.10 	Version du Dispositif Médical	V.4.0.0
5.1.1 	Fabricant	Cureety 33 Rue de l'Amirauté 22100 DINAN
5.1.11 	Pays de fabrication	France
5.1.3 	Date de fabrication	25/04/2021
	Consulter le manuel d'utilisation	
5.7.4 	Site web d'information pour les patients	app.cureety.com
5.7.10 	Unique Device Identifier	(01)3770026852002(11)210425(8012) 400



Vous êtes maintenant prêt(e) à utiliser Cureety et à bénéficier de tous les avantages de l'application.

Vos retours sont importants pour nous. Si vous rencontrez des problèmes techniques ou si vous avez des questions et suggestions, vous pouvez directement contacter l'équipe informatique de Cureety :

- par email à support@cureety.com
- par téléphone au **07 66 72 30 47**

Dernière mise à jour du manuel le 17/11/2023 (v4)